



# LA PERFUSION INTUITIVE

Gamme compact<sup>plus</sup>

# Infusomat et Perfusor compact<sup>plus</sup>



ÉCRAN  
COULEUR




AIDE À  
L'UTILISATION



INTERFACE  
INTUITIVE



B. BRAUN  
DOSEGWARD

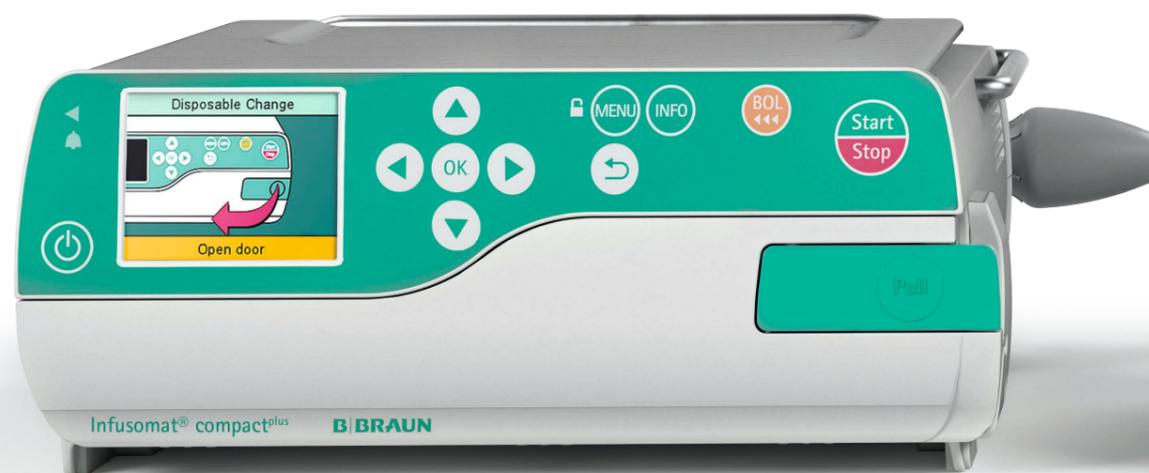

PRISE EN  
MAIN FACILE



DÉMARRAGE  
RAPIDE



PRÉCISION  
OPTIMISÉE



BATTERIE  
LI-ION



ALIMENTATION  
INTÉGRÉE



POIGNÉE  
INTÉGRÉE



CONCEPTION  
ROBUSTE



ÉTANCHÉITÉ  
IP34


# Perfusor compact<sup>plus</sup>



**Modulable**  
Pour une utilisation et un transport simplifiés.

**Interface graphique**  
Pour une prise en main facilitée.

**Chargement semi-automatique de la seringue**  
Une opération rapide en toute sécurité.

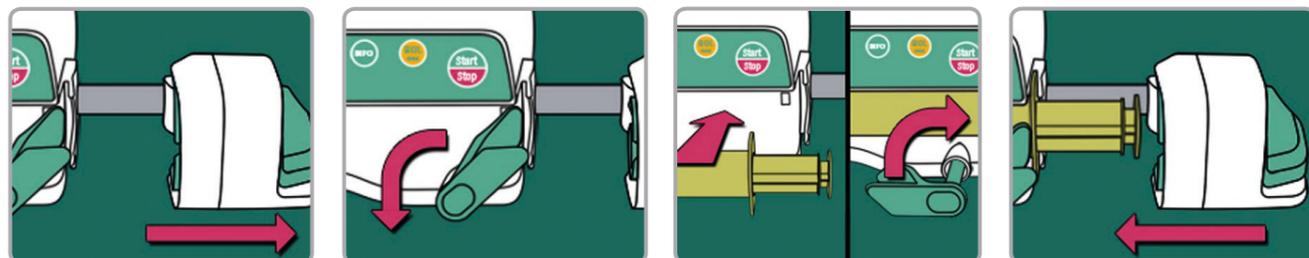

  
ÉCRAN COULEUR

  
AIDE À L'UTILISATION

  
INTERFACE INTUITIVE

# Infusomat compact<sup>plus</sup>



**Clamp anti-écoulement libre**  
La ligne est automatiquement clampée lorsque la porte est ouverte afin d'éviter tout écoulement involontaire.

**Infusomat<sup>plus</sup> Line**  
L'insertion est facilitée par la forme des détrompeurs et leur code couleur. La tubulure garantit une précision longue durée (96h).





**AIR STOP**

**AirStop**  
Une membrane empêchant tout passage d'air. Elle contribue à diminuer le risque d'infection et empêche le désamorçage de ligne.




**PRIME STOP**

**PrimeStop**  
Un capuchon anti-écoulement conçu pour éviter les contaminations et pour protéger le personnel soignant.

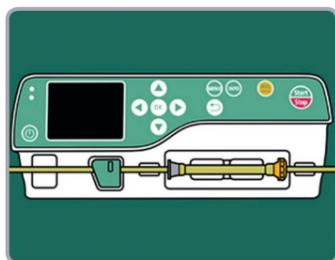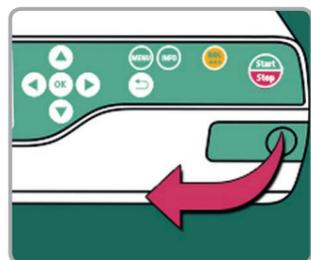

**THÉRAPIE DE NUTRITION**

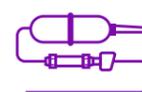

**INFUSOMAT<sup>PLUS</sup> SAFESSET**



**ÉCRAN COULEUR**



**AIDE À L'UTILISATION**



**INTERFACE INTUITIVE**

# Station compact<sup>plus</sup>



**Assemblage facile**  
Aucun outil nécessaire.



**Alimentations**  
Protection contre les chocs électriques, nettoyage facilité.

**Support d'appareil**  
Permet la mise en place des appareils par simple glissement.



**18** Configuration modulaire  
Jusqu'à 18 appareils / 6 stations empilables pour un seul patient.

 **Module Com compact<sup>plus</sup>**  
Pour une perfusion automatisée connectée au SIH.



MISE EN PLACE  
PAR GLISSEMENT



PROTECTION CONTRE LES  
CHOCs ÉLECTRIQUES



ASSEMBLAGE  
FACILE



CONNEXION  
ETHERNET

# B. Braun Doseguard

## Limites de dose




### B. Braun DoseGuard - Limites de dose

- Plus de 3000 médicaments
- Distinction de chaque service
- Programmation en fonction du poids du patient




# B. Braun OnlineSuite

## Solutions connectées pour la perfusion automatisée

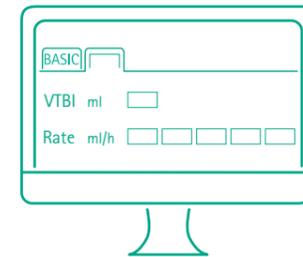


### Drug Library Manager

Personnalisation des bibliothèques de médicaments.

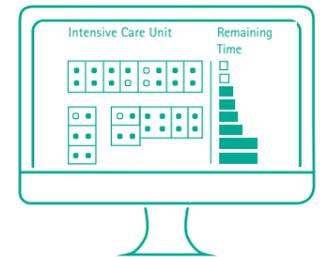

### OneView

Monitoring de l'ensemble du service pour le personnel soignant.

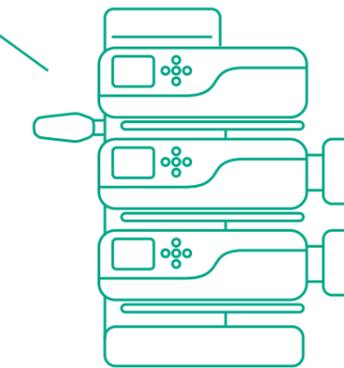

### OnlineSuite - La perfusion connectée

- Une seule plate-forme pour gérer tout le parc de perfusion automatisée
- Intégration au système informatique de l'établissement




### Upload Manager

Chargement des mises à jour et des bibliothèques de médicaments à distance en un clic.



B. BRAUN  
ONLINESUITE

# Données techniques

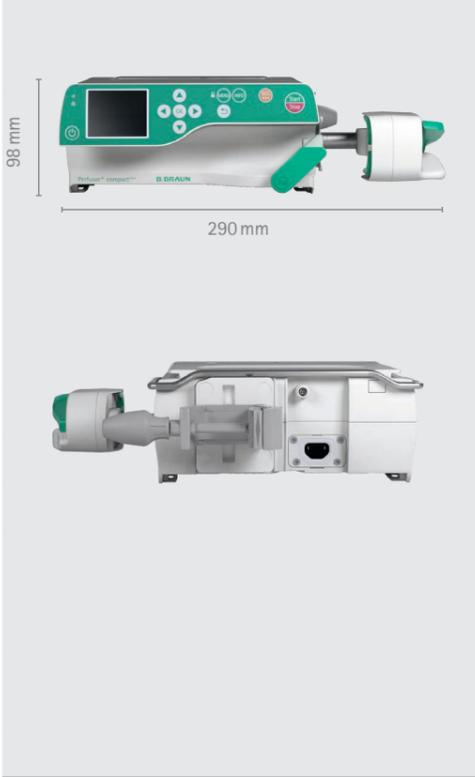Perfusor® compact <sup>plus</sup>	Description	
Type	Pousse-seringue électrique	 <p>98 mm</p> <p>290 mm</p>
Dimensions	290x98x220 mm (l x h x p)	
Poids	2.3 kg	
Étanchéité	IP34 (projections d'eau dans toutes les directions)	
Ecran	Ecran couleur 2.4", 240x320 pixels, couleurs 262k, angle de vue: 80°	
Batterie	Batterie rechargeable Li-ion Utilisation: approx. 12h à 25mL/h Temps de recharge: approx. 4h	
Débits de perfusion	0.1-999.9 mL/h	
Précision	± 2% selon la norme EN/CEI 60601-2-24	
Débits bolus	1 - 1 800 mL/h	
Seringues compatibles	B. Braun Original Perfusor®, Omnifix®, BD, Terumo, Monoject Tailles: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 mL	
Bibliothèque de médicaments	Jusqu'à 3 000 médicaments répartis en 15 catégories	
Référence article	8717030	

Infusomat® compact <sup>plus</sup>	Description	
Type	Pompe à perfusion volumétrique	 <p>98 mm</p> <p>229 mm</p>
Dimensions	229x98x220 mm (l x h x p)	
Poids	1.9 kg	
Étanchéité	IP34 (projections d'eau dans toutes les directions)	
Ecran	Ecran couleur 2.4", 240x320 pixels, couleurs 262k, angle de vue: 80°	
Batterie	Batterie rechargeable Li-ion Utilisation: approx. 9h à 100 mL/h Temps de recharge: approx. 4h	
Débits de perfusion	0.1-1 200 mL/h	
Précision	± 5% sur 96 h	
Débit de bolus	1 - 1 200 mL/h	
Tubulures compatibles	Tubulures Infusomat <sup>plus</sup>	
Bibliothèque de médicaments	Jusqu'à 3 000 médicaments répartis en 15 catégories	
Référence article	8717050	

## NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Groupes	
Alcools	Formule avec Ammonium Quaternaire
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meliseptol® Rapid</li> <li>▪ Meliseptol® HBV Tissues</li> <li>▪ Meliseptol® Foam pure</li> <li>▪ Meliseptol® Wipes sensitive</li> </ul>	
Aldéhydes	Eau de Javel
	Phénols
Acides	Peroxides
	Alkylamines

La liste de produits nettoyants ci-dessus est approuvée sous réserve d'une utilisation dans le cadre des procédures normales de désinfection, respectant les recommandations du fabricant.

# Données techniques

Station compact <sup>plus</sup>	Description	
Type	Rack de raccordement pour un maximum de 3 appareils.	
Dimensions	305x375x202 mm (l x h x p)	
Poids	3.3 kg	
Étanchéité	IP34 (projections d'eau dans toutes les directions)	
Configuration	Configuration dynamique jusqu'à 6 Stations compact <sup>plus</sup> (max. 18 appareils) sur une ou deux colonne(s)	
Interfaces	- Infrarouge - Appel infirmier	
Accessoires	Fixation pour l'accrochage aux rails horizontaux	
Pole Clamp	Pour montage vertical des stations avec dispositif anti-serrage	
Référence article	8717141	

Cover compact <sup>plus</sup>	Description	
Type	Capot pour Station compact <sup>plus</sup>	
Dimensions	128x44x124 mm (l x h x p)	
Poids	0.25 kg	
Étanchéité	IP34 (projections d'eau dans toutes les directions)	
Référence article	8717145	

Data module compact <sup>plus</sup>	Description	
Type	Data module pour Station compact <sup>plus</sup>	
Dimensions	243x92x235 mm (l x h x p)	
Poids	1.1 kg	
Étanchéité	IP34 (projections d'eau dans toutes les directions)	
Interfaces	Module de communication optionnel pouvant être intégré à la Station compact <sup>plus</sup> et permettant l'échange de données pour 18 appareils maximums. Interfaces: Ethernet, 2 x USB, WiFi, HDMI.	
Référence article	8717160	

# Accessoires

Product	Description	Code no. (REF)
Câble d'extension compact <sup>plus</sup> 60 cm	Câble pour connecter deux Stations compact <sup>plus</sup>	8718060
Câble d'extension compact <sup>plus</sup> 120 cm	Câble pour connecter deux Stations compact <sup>plus</sup>	8718061
Câble d'extension compact <sup>plus</sup> 1,000 cm	Câble pour connecter deux Stations compact <sup>plus</sup>	8718062
Prise 12V compact <sup>plus</sup>	Allume-cigare	8718020
Câble d'appel infirmier compact <sup>plus</sup>	Câble pour connecter un appareil à l'appel du personnel soignant	8718030
Câble d'appel infirmier Station compact <sup>plus</sup>	Câble pour connecter une station à l'appel du personnel soignant	8718031
Fixation sur rail horizontal compact <sup>plus</sup>	Fixation pour l'accrochage aux rails horizontaux	8717142

## Comment commander ?



Service client Investissement - [specialites@bbraun.com](mailto:specialites@bbraun.com)  
01.41.10.53.00 puis serveur vocal 1-1-3

Service client SAV - [bbmf\\_adv\\_sav@bbraun.com](mailto:bbmf_adv_sav@bbraun.com)  
01.41.10.53.00 puis serveur vocal 5

## Accédez au contenu en ligne !



Retrouvez la gamme compact<sup>plus</sup> et l'ensemble des innovations imaginées pour vous sur notre site [bbraun.fr](http://bbraun.fr)



Fabriqué par :

B. Braun Melsungen AG | Carl-Braun Straße 1 | 34212 Melsungen - Allemagne

Distribué par :

B. Braun Medical | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud - France

Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr)

B. Braun Medical | Société par Actions Simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Document réservé aux professionnels de santé. Dispositif médical de classe IIb fabriqué par B. Braun Melsungen AG. Certificat CE 0123 délivré par le TÜV SÜD Product Service. Le système actif pour perfusion B. Braun compact<sup>plus</sup> est composé des dispositifs médicaux suivants : Perfusor<sup>®</sup> compact<sup>plus</sup>, Infusomat<sup>®</sup> compact<sup>plus</sup> et la Station compact<sup>plus</sup>. Consultez les notices spécifiques à chacun pour plus d'informations. Ne fait pas l'objet à l'hôpital d'une prise en charge au titre de la Liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L165-1 du code de la sécurité sociale.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document et photo non contractuels. Ed. 06/2018